

MEDIVET
COVETRUS

PRODUKTY



KRUUSE Urologia

kruuse.com

Zamawiaj na www.medivet.pl



KRUUSE Urologia

Cewniki dla psów	5
Cewniki dla kotów	16
Sztuczne zapłodnienie	19
Akcesoria	20
Zasoby	22

KRUUSE – urologia

Asortyment cewników KRUUSE obejmuje pełną gamę cewników moczowych dla kotów i psów – wszystko, czego potrzebujesz do najlepszej praktyki cewnikowania i opieki nad pacjentem.

Nasza wysokiej jakości gama przyjaznych dla użytkownika cewników jest mniej skomplikowana dla Twojego personelu i bardziej wygodna dla Twoich pacjentów! Cewniki moczowe KRUUSE są atraumatyczne i biokompatybilne, co minimalizuje ryzyko jatrogennych urazów cewki moczowej i zakażeń układu moczowego (ZUM).

Od krótkotrwałego przepłukiwania po długotrwały drenaż pooperacyjny – zaspokajamy Twoje potrzeby cewnikami, które maksymalizują komfort i minimalizują ryzyko urazu.

Radiocieniujące dla
widoczności w RTG

Port balonu z kodem kolorystycznym w
celu łatwej identyfikacji rozmiaru

Miękkie i elastyczne przewody
zapewniające komfort pacjenta

Balon retencyjny zapobiega
przemieszczeniu cewnika

Idealny do

- Drenażu
- Pobieranie próbek moczu
- Płukania pęcherza

Łatwy w użyciu

- Łatwe rozmieszczenie
- Znacznik radiocieniujący
- Rozmiar oznaczony kodem kolorystycznym

Komfort pacjenta

- Miękkie i elastyczne
- Wysoka biokompatybilność
- Długotrwałe stosowanie



Cewnik BUSTER Foley Plus

2-kierunkowy cewnik z balonem retencyjnym 1,5 cm³ (ml) / 3-5 cm³, wysoka biokompatybilność, odpowiedni do długotrwałego stosowania.

Lepsze bezpieczeństwo pacjentów


Balon retencyjny unieruchamia cewnik w miejscu, a zaokrąglona końcówka i atraumatyczne otwory boczne pomagają uniknąć uszkodzenia tkanek.

Wysokie biokompatybilny silikon sprawia, że cewnik nadaje się do długotrwałego stosowania do 7 dni.

Łatwe wprowadzanie - bez mandrynu

Cewnik jest wykonany z białego silikonu z dodaną substancją, która zwiększa twardość cewnika.

Oznacza to, że sztywność cewnika jest zwiększona w porównaniu z cewnikiem BUSTER Foley, a zatem jego wprowadzanie nie wymaga mandrynu.

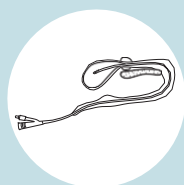

ETAP 1

- Włożyć cewnik przez cewkę moczową do pęcherza moczowego



ETAP 2

- Napełnić balon 1,5 cm³ (ml) / 3-5 cm³ (ml) izotonicznym roztworem soli fizjologicznej




ETAP 3

- Podłączyć worek na moczu BUSTER (nr kat. 273856) do zbierania i kontrolowania przepływu moczu

Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Kolor	Ilość cm ³ (ml) w balonie retencyjnym	Wymiary	Opakowanie
273880	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	 Zielony	1,5 cm ³ (ml)	2 mm x 30 cm / 6 Fr x 12"	5/op.
273881	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	 Zielony	1,5 cm ³ (ml)	2 mm x 55 cm / 6 Fr x 22"	5/op.
273882	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	 Niebieski	3-5 cm ³ (ml)	2,7 mm x 30 cm / 8 Fr x 12"	5/op.
273883	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	 Niebieski	3-5 cm ³ (ml)	2,7 mm x 55 cm / 8 Fr x 22"	5/op.
273884	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	 Czarny	3-5 cm ³ (ml)	3,3 mm x 30 cm / 10 Fr x 12"	5/op.
273885	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	 Czarny	3-5 cm ³ (ml)	3,3 mm x 55 cm / 10 Fr x 22"	5/op.



Port balonu ze wskazaniem rozmiaru za pomocą kodu kolorystycznego – identyfikacja rozmiaru oznaczonego kolorem

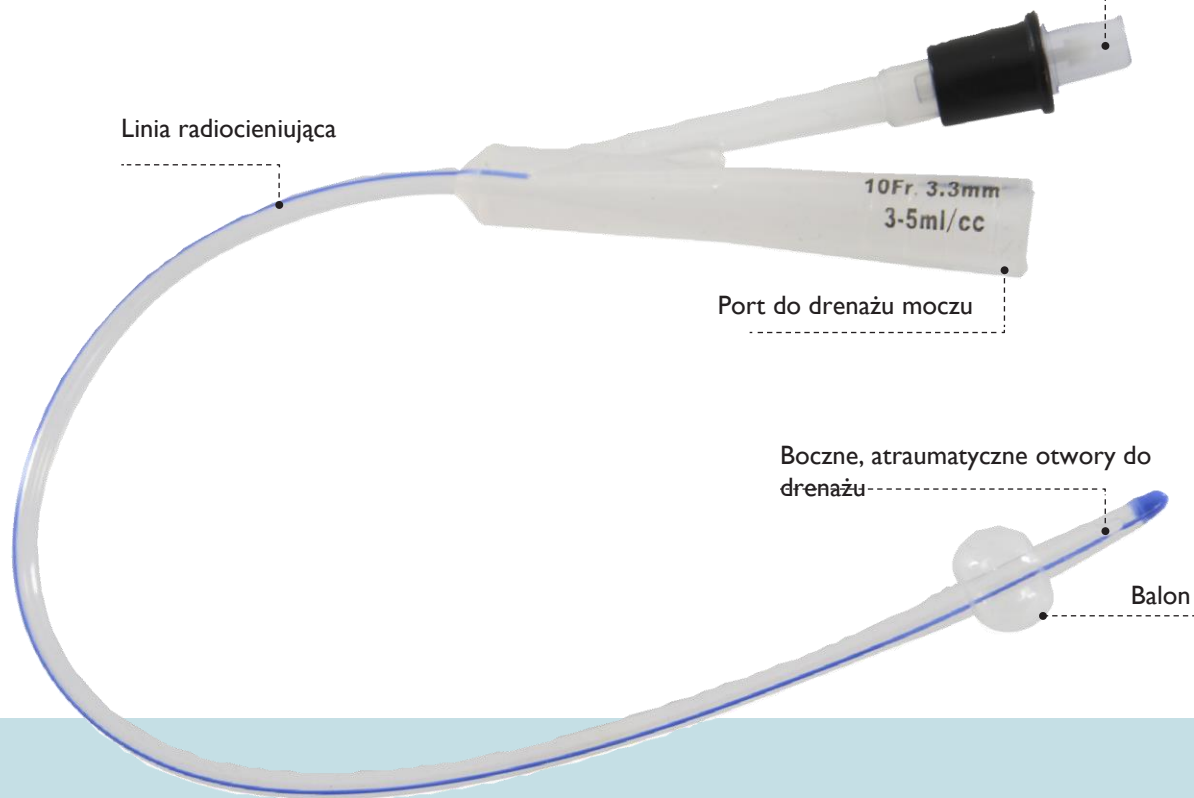


Instrukcja użycia



ETAP 1

- Włożyć cewnik przez cewkę moczową do pęcherza moczowego

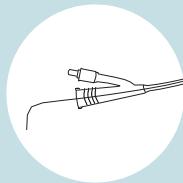


ETAP 2

- Delikatnie usunąć stalowy przewodnik



ETAP 3

- Napełnić balon 3 cm³ (ml) / 3-5 cm³ (ml) izotonicznym roztworem soli fizjologicznej

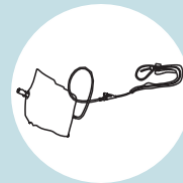

ETAP 4

- Podłączyć worek na mocz (nr kat. 273856) do zbierania i kontrolowania przepływu moczu

Cewnik BUSTER Foley, silikonowy

2-kierunkowy cewnik w 100% silikonowy z balonem retencyjnym 3 cm³ (ml) / 3-5 cm³ (ml) i mandrynem.

Cewnik ma zaokrągloną końcówkę i atraumatyczne otwory boczne. Jest bardzo biokompatybilny, a zatem nadaje się do dłuższego stosowania w cewce moczowej / pęcherzu (do 7 dni).

- Cewnik silikonowy o wysokiej biokompatybilności
- Nadaje się do długotrwałego stosowania
- Łatwy do usunięcia stalowy przewodnik
- Kolorowa nasadka ułatwiająca rozpoznawanie rozmiarów

Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Kolor	Ilość cm ³ (ml) w balonie retencyjnym	Wymiary	Opakowanie
273860	Otwory boczne z drutem	Tak	● Zielony	3 cm ³ (ml)	2 mm x 30 cm / 6 Fr x 12"	5/op.
273861	Otwory boczne z drutem	Tak	● Zielony	3 cm ³ (ml)	2 mm x 55 cm / 6 Fr x 22"	5/op.
273862	Otwory boczne z drutem	Tak	● Niebieski	3-5 cm ³ (ml)	2,7 mm x 30 cm / 8 Fr x 12"	5/op.
273863	Otwory boczne z drutem	Tak	● Niebieski	3-5 cm ³ (ml)	2,7 mm x 55 cm / 8 Fr x 22"	5/op.
273858	Otwory boczne z drutem	Tak	● Niebieski	3-5 cm ³ (ml)	2,7 mm x 70 cm / 8 Fr x 28"	5/op.
273864	Otwory boczne z drutem	Tak	● Czarny	3-5 cm ³ (ml)	3,3 mm x 30 cm / 10 Fr x 12"	5/op.
273865	Otwory boczne z drutem	Tak	● Czarny	3-5 cm ³ (ml)	3,3 mm x 55 cm / 10 Fr x 22"	5/op.
273859	Otwory boczne z drutem	Tak	● Czarny	3-5 cm ³ (ml)	3,3 mm x 70 cm / 10 Fr x 28"	5/op.



Cewnik dla psów BUSTER HC

Z powłoką hydrofilową

Zgodnie z naszą obecną ofertą, produkt ten stworzono w oparciu o przekonanie, że pacjenci weterynaryjni powinni mieć dostęp do tego samego standardu materiałów eksploatacyjnych, co ludzie.

Co takiego rewolucyjnego jest w tym cewniku moczowym? Cała długość cewnika ma powłokę hydrofilową.

Gdy powłoka zostanie aktywowana w wodzie, powierzchnia staje się bardzo gładka i lepka na całej długości cewnika.

Powłoka hydrofilowa znacznie zmniejsza tarcie w cewce moczowej psa, zapewniając psom oczywiste korzyści.

Pomaga zmniejszyć dyskomfort pacjenta i zapobiega uszkodzeniom jatrogennym cewki moczowej.

Cewniki powlekane hydrofilowo zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak mniejsza ilość mikroskopijnego krwimoczu i zmniejszona częstość występowania jatrogenego ZUM (zakażenie układu moczowego).

Nr kat.	Typ	Wyrób jąłowy	Kolor	Wymiary	Opakowa nie
273800	Powłoka hydrofilowa, otwory boczne	Tak	 Szary	1,6 mm x 50 cm / 5 Fr x 20"	5/op.
273801	Powłoka hydrofilowa, otwory boczne	Tak	 Zielony	2,0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	5/op.
273802	Powłoka hydrofilowa, otwory boczne	Tak	 Niebieski	2,6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	5/op.
273803	Powłoka hydrofilowa, otwory boczne	Tak	 Czarny	3,3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	5/op.

Instrukcja użycia



ETAP 1

- Otworzyć torebkę



Etap 2

- Wlać żądaną ilość wody do torebki



Etap 3

- Po 30 sekundach cewnik jest gotowy do użycia

Uwaga: Cewnik nie może zostać pozostawiony w cewce moczowej dłużej niż 10 minut.





Cewnik dla psów BUSTER NC

Niepowlekany

Cewnik dla psów BUSTER NC jest miękkim i biokompatybilnym cewnikiem. Wykonany jest z PVC klasy medycznej i nie zawiera DEHP (ftalanów). W przypadku miękkiego cewnika istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia błon śluzowych w cewce moczowej i pęcherzu w porównaniu do sztywniejszych cewników.

Sposób użycia



ETAP 1

- Otworzyć torebkę



ETAP 2

- Dodać żel



ETAP 3

- Cewnik jest gotowy do cewnikowania

Nr kat.	Typ	Wyrób jąłowy	Kolor	Wymiary	Opakowa nie
273804	Niepowlekany, otwory boczne	Tak	● Szary	1,6 mm x 50 cm / 5 Fr x 20"	5/op.
273805	Niepowlekany, otwory boczne	Tak	● Zielony	2,0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	5/op.
273806	Niepowlekany, otwory boczne	Tak	● Niebieski	2,6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	5/op.
273807	Niepowlekany, otwory boczne	Tak	● Czarny	3,3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	5/op.



Cewnik dla psów BUSTER

Popularny cewnik dla psów BUSTER jest dostępny w 7 rozmiarach. Wykonany z polipropylenu.

Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Kolor	Wymiary	Opakowanie
273405	Otwory boczne	Tak	○ Biały	1,3 mm x 50 cm / 4 Fr x 20"	12/op.
273406	Otwory boczne	Tak	○ Biały	1,6 mm x 50 cm / 5 Fr x 20"	12/op.
273410	Otwory boczne	Tak	○ Biały	2,0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	12/op.
273411	Otwory boczne	Tak	○ Biały	2,3 mm x 50 cm / 7 Fr x 20"	12/op.
273420	Otwory boczne	Tak	○ Biały	2,6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	12/op.
273421	Otwory boczne	Tak	○ Biały	3,0 mm x 50 cm / 9 Fr x 20"	12/op.
273430	Otwory boczne	Tak	○ Biały	3,3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	12/op.




Zaokrąglony koniec i
atraumatyczne otwory
boczne



Elastyczne przewody
polipropylenowe



Złącze Luer Lock

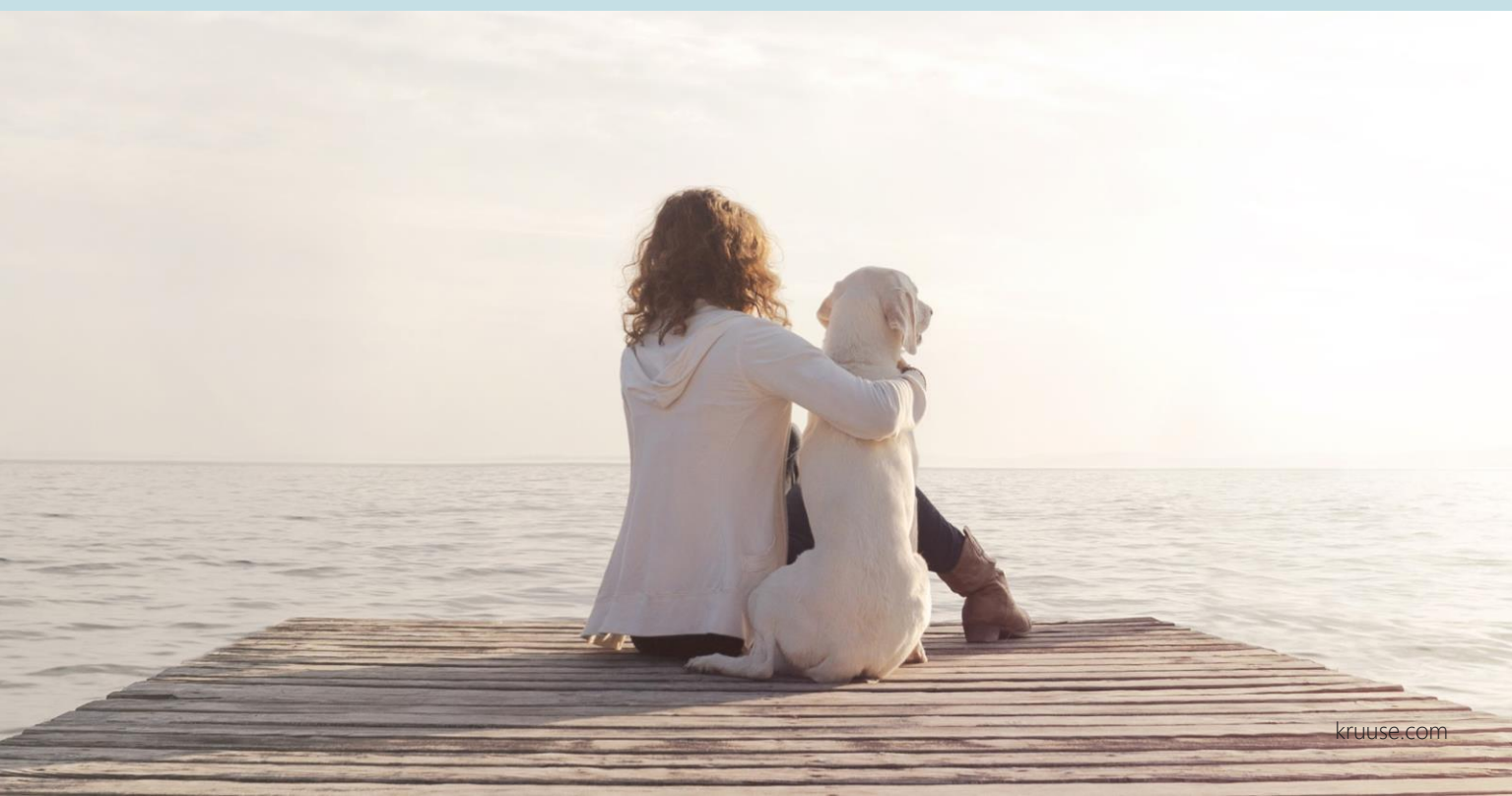



Cewnik płuczący dla psów, otwarty koniec

Oparty na popularnym cewniku dla psów BUSTER, cewnik ten jest idealny do przepłukiwania cewki moczowej w celu złagodzenia niedrożności.

Najlepsza praktyka

Cewnik otwarty zapewnia optymalne warunki do wypłukiwania urolitów dystalnie do pęcherza.

Łatwy w użyciu


Polipropylenowy przewód cewnika jest sztywny, ale jednak nadal elastyczny dla łatwego wprowadzenia i umieszczenia cewnika.

Złącze Luer Lock zapewnia łatwe i bezpieczne mocowanie strzykawki.

Zwiększone bezpieczeństwo pacjentów

Cewnik ten pomaga zapobiegać niepotrzebnym uszkodzeniom tkanek dzięki atraumatycznemu, zaokrąglonemu otworowi końcowemu, a także dlatego, że ciśnienie wody jest bezpośrednio ukierunkowane na niedrożność, a nie na ścianę cewki moczowej.


Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Kolor	Wymiary	Opakowanie
273415	Otwarty koniec	Tak	○ Biały	1,3 mm x 50 cm / 4 Fr x 20"	12/op.
273416	Otwarty koniec	Tak	○ Biały	2,0 mm x 50 cm / 6 Fr x 20"	12/op.
273417	Otwarty koniec	Tak	○ Biały	2,6 mm x 50 cm / 8 Fr x 20"	12/op.
273418	Otwarty koniec	Tak	○ Biały	3,3 mm x 50 cm / 10 Fr x 20"	12/op.

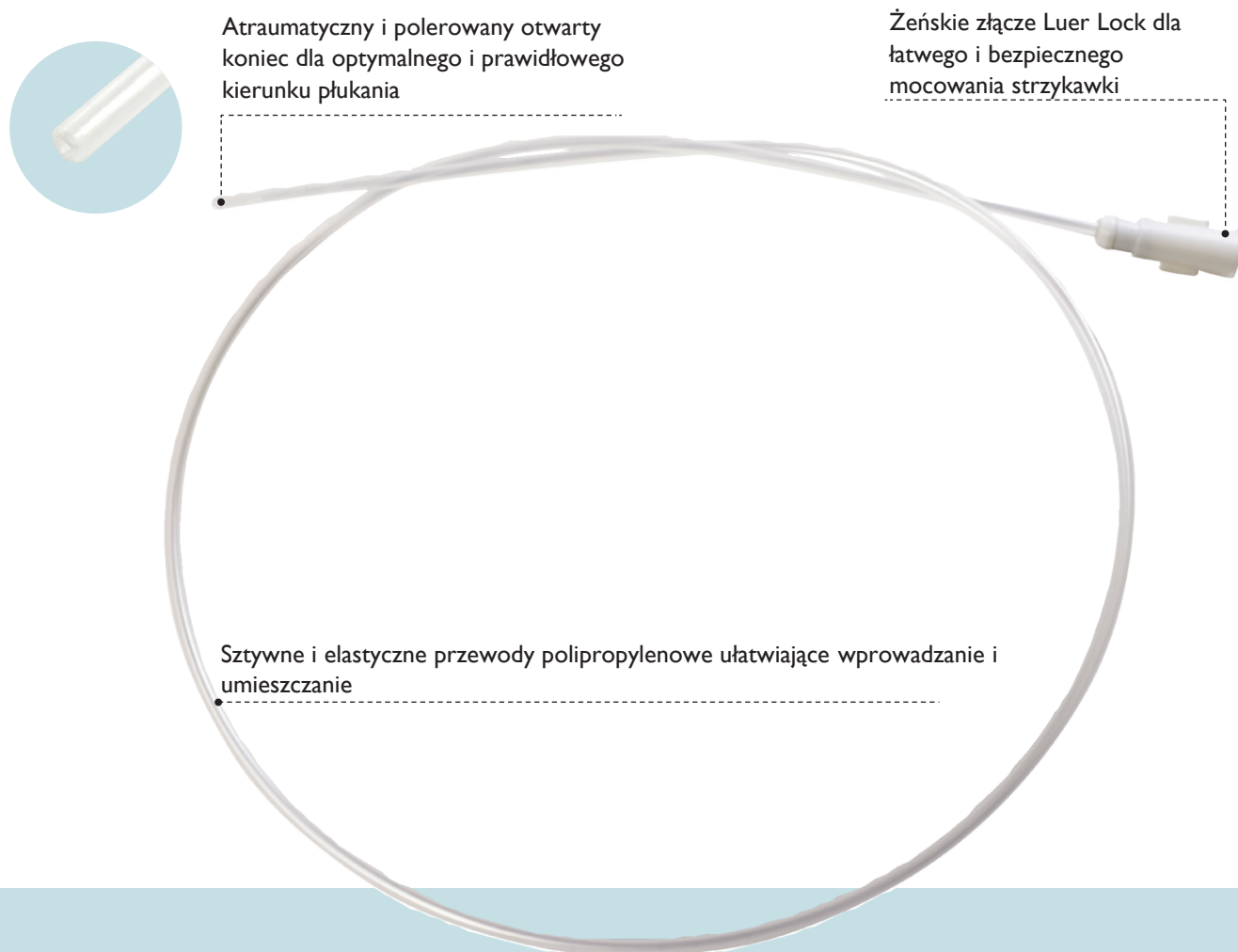

Andrew Jackson, DVM, DACVS stwierdza:

„Niedrożności cewki moczowej u psów są powszechne w praktyce weterynaryjnej. Przeszkody te mogą być trudne do usunięcia, a wielu pacjentów jest kierowanych do szpitali ratunkowych/specjalistycznych z istniejącą nadal niedrożnością. Nie musi tak być! Dzięki kilku precyzyjnym, ale prostym czynnościom lekarze ogólni mogą złagodzić większość niedrożności cewki moczowej przy minimalnym zakłóceniu życia pacjenta”.

Źródło: <https://www.dvm360.com/view/surgery-stat-pinch-and-flush-relieving-urethral-obstructions-male-dogs>

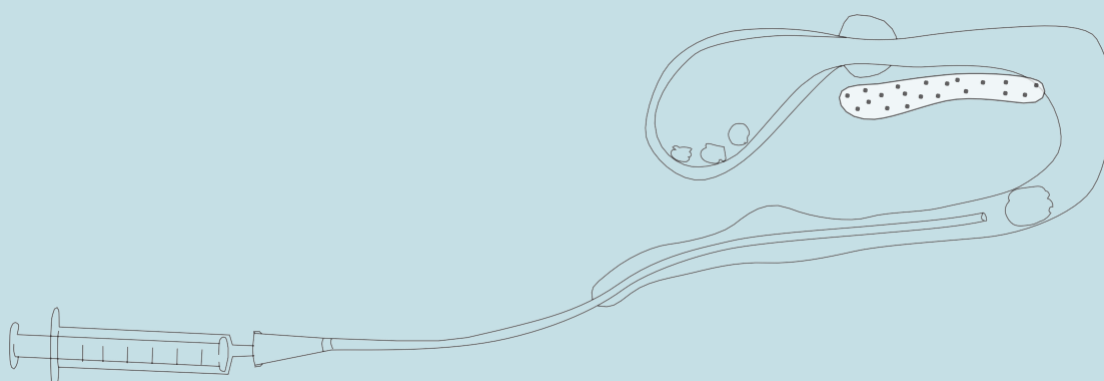



Natychmiastowy (<10 min)
– Cewnik moczowy BUSTER HC




Przełukiwanie (0-60 minut)
– Cewnik płuczący dla psów BUSTER,
otwarty koniec



Krótkoterminowy (0-1 dzień)
– Cewnik dla psów BUSTER



Średnioterminowy (1-3 dni)
– Cewnik moczowy BUSTER NC

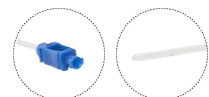

Długoterminowy (0-7 dni)
– Cewnik BUSTER Foley
– Cewnik BUSTER Foley Plus



Natychmiastowy (0-10 minut)

Zastosowania
kliniczne

- Pobieranie próbek moczu
- Kontrola drożności cewki moczowej
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza

Cewnik moczowy BUSTER HC

- ✓ Nie ma potrzeby stosowania żelu
- ✓ Miękki i wygodny, wykonany z PVC
- ✓ Kolorowa obsadka i etykieta ułatwiająca rozpoznawanie rozmiaru
- ✓ Luer Lock na obsadce umożliwia łatwe podłączenie do strzykawki

Zalecane cewniki

Przełukiwanie (0-60 minut)

- Pobieranie próbek moczu
- Kontrola drożności cewki moczowej
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza
- Płukanie cewki moczowej

Cewnik płuczący dla psów BUSTER

- ✓ Bardziej sztywny cewnik wykonany z polipropylenu
- ✓ Luer Lock na obsadce umożliwia łatwe podłączenie do strzykawki lub worka na mocz
- ✓ Atraumatyczny, zaokrąglony otwór na końcu dla optymalnego przepłukiwania

Krótkoterminowy (0-1 dzień)

- Pobieranie próbek moczu
- Kontrola drożności cewki moczowej
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza

Cewnik dla psów BUSTER

- ✓ Bardziej sztywny cewnik wykonany z polipropylenu
- ✓ Luer Lock na obsadce umożliwia łatwe podłączenie do strzykawki lub worka na mocz
- ✓ Atraumatyczne otwory boczne

Średnioterminowy (1-3 dni)

Zastosowania
kliniczne

- Pobieranie próbek moczu
- Kontrola drożności cewki moczowej
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza
- Cewnik do drenażu podczas operacji lub hospitalizacji

Cewnik moczowy BUSTER NC

- ✓ Miękki i wygodny
- ✓ Kolorowa obsadka i etykieta ułatwiająca rozpoznawanie rozmiaru
- ✓ Luer Lock na obsadce umożliwia łatwe podłączenie do strzykawki lub worka na mocz

Zalecane cewniki

Długoterminowy (0-7 dni)

- Pobieranie próbek moczu
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza
- Cewnik do drenażu podczas operacji lub hospitalizacji

BUSTER Foley z mandrynem i BUSTER Foley Plus bez mandrynu


- ✓ Bardzo miękki silikonowy cewnik o wysokiej biokompatybilności
- ✓ Kolorowa obsadka i etykiety ułatwiająca rozpoznawanie rozmiaru
- ✓ Port do drenażu moczu pasuje do worka na mocz KRUUSE
- ✓ Radiocieniujący dla widoczności w RTG






Płukanie i użycie krótkoterminowe (0-1 dzień)

- Cewnik dla kotów BUSTER Easy Slide, otwarty koniec
- Cewnik do płukania dla kotów BUSTER

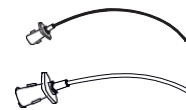

Średnioterminowy (0-3 dni)

- Cewnik dla kotów BUSTER Easy Slide, otwory boczne
- Cewnik dla kotów BUSTER, otwory boczne

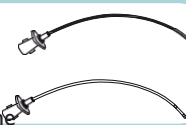

Długoterminowy (0-7 dni)

- Cewnik dla kotów BUSTER Barium, otwory boczne



Płukanie i użycie krótkoterminowe (0-1 dzień)

Zastosowania kliniczne

Pobieranie próbek moczu

- Kontrola drożności cewki moczowej
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza
- Płukanie cewki moczowej

Cewnik dla kotów BUSTER Easy Slide, otwarty koniec

- ✓ Optymalna sztywność
- ✓ Miękkie i dostosowuje się do anatomii
- ✓ Radiocieniujący dla widoczności w RTG, wykonany z politetrafluoroetylen (PTFE)

Cewnik do płukania dla kotów BUSTER

- ✓ Wykonany z polipropylenu
- ✓ Większa sztywność dla łatwego wprowadzania

Średnioterminowy (0-3 dni)

- Pobieranie próbek moczu
- Kontrola drożności cewki moczowej
- Łagodzenie napięcia pęcherza
- Płukanie pęcherza

Cewnik dla kotów BUSTER Easy Slide, otwory boczne

- ✓ Optymalna sztywność
- ✓ Miękkie i dostosowuje się do anatomii
- ✓ Radiocieniujący dla widoczności w RTG, wykonany z politetrafluoroetylen (PTFE)

Cewnik dla kotów BUSTER, otwory boczne

- ✓ Miękki i elastyczny cewnik wykonany z polietylen
- ✓ Z mandrynem lub bez

Długoterminowy (0-7 dni)


Zastosowania kliniczne

- Idealny dla pacjentów hospitalizowanych i poddawanych zabiegom chirurgicznym

Cewnik dla kotów BUSTER Barium

- ✓ Wykonany z poliuretanu i zawiera bar
- ✓ Radiocieniujący dla widoczności w RTG
- ✓ Poliuretan miękkie w temperaturze ciała, co zwiększa biokompatybilność, przez co cewnik nadaje się się do długotrwałego stosowania i u hospitalizowanych pacjentów



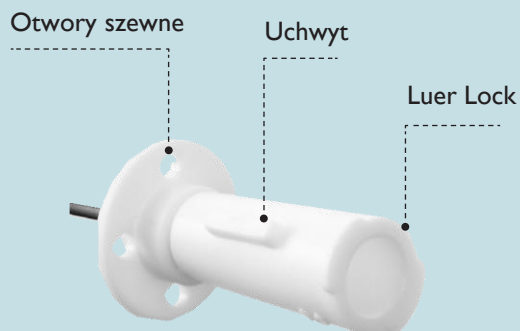

Cechy ogólne cewników dla kotów BUSTER

- Luer Lock
- Mały uchwyt na obsadce
- Obrotowa płyta podstawowa z otworami do zszywania
- Metalowy klin zabezpiecza przed odłączeniem przewodu od obsadki


Cewniki dla kotów BUSTER, otwory boczne

Cewniki dla kotów BUSTER z zamkniętym końcem i otworami bocznymi są idealne do pobierania próbek moczu, usuwania zatrzymania moczu i płukania pęcherza moczowego. Cewnik jest wykonany z PE klasy medycznej wolnej od DEHP, o dobrych właściwościach biokompatybilnych.

- Zaokrąglony koniec pomaga uniknąć uszkodzenia tkanek
- Dostępny z mandrynem lub bez



Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Wymiary	Opakowanie
273441	Otwory boczne, z mandrynem	Tak	1,0x100 mm / 3 Fr x 4"	12/op.
273451	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	1,0x130 mm / 3 Fr x 5 1/8"	12/op.
273461	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	1,3x130 mm / 4 Fr x 5 1/8"	12/op.
273453	Otwory boczne, z mandrynem	Tak	1,0x130 mm / 3 Fr x 5 1/8"	12/op.
273463	Otwory boczne, z mandrynem	Tak	1,3x130 mm / 4 Fr x 5 1/8"	12/op.
273457	Otwory boczne, bez mandrynu	Tak	1,3x160 mm / 4 Fr x 6 1/3"	12/op.
273456	Otwory boczne, z mandrynem	Tak	1,3x160 mm / 4 Fr x 6 1/3"	12/op.

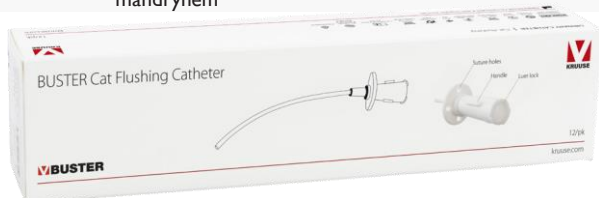

Cewnik do płukania dla kotów BUSTER

Cewnik ten z otwartym otworem końcowym jest przydatny do spłukiwania urolitów wstecznie do pęcherza.

Cewnik wykonany jest z polipropylenu, co czyni go bardziej sztywnym, a tym samym łatwiejszym do włożenia do cewki moczowej.

Z OTWARTYM KOŃCEM, BEZ MANDRYNU

Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Wymiary	Opakowanie
273445	Otwarty koniec, bez mandrynu	Tak	1,0x130 mm / 3 Fr x 5 1/8"	12/op.
273446	Otwarty koniec, bez mandrynu	Tak	1,3x130 mm / 4 Fr x 5 1/8"	12/op.


Cewnik dla kotów BUSTER Easy Slide

Popularny cewnik dla kotów niezawierający DEHP (ftalanów), wykonany z politetrafluoroetyleny (PTFE) klasy medycznej. Cewnik dla kotów BUSTER Easy Slide jest dostępny w dwóch wariantach: z otwartym końcem lub z otworami bocznymi – oba warianty nadają się do drenażu i/lub płukania pęcherza moczowego.

Charakterystyka i zalety

- Wysoka biokompatybilność
- Nadaje się do średnio- i długotrwałego stosowania (0-3 dni)
- Optymalna sztywność (bez potrzeby stosowania mandrynu), z zachowaniem odpowiedniej miękkości
- Wysoce poślizgowy materiał przewodu cewnika, który zapewnia łatwe cewnikowanie
- Radioceniujący – widoczny w RTG
- Mały rozmiar opakowania

**GŁADKIE I POŚLIZGOWE DLA ŁATWEGO
I NIESKOMPLIKOWANEGO
CEWNIKOWANIA**

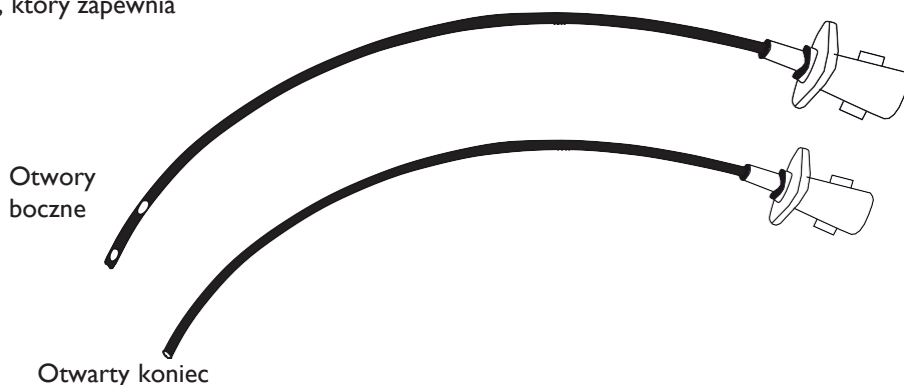

Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Wymiary	Opakowanie
273400	Otwory boczne	Tak	1,2x110 mm / 3,5 Fr x 41/3"	5/op.
273401	Otwory boczne	Tak	1,2x140 mm / 3,5 Fr x 51/2"	5/op.
273436	Otwarty koniec	Tak	1,2x110 mm / 3,5 Fr x 41/3"	5/op.
273437	Otwarty koniec	Tak	1,2x140 mm / 3,5 Fr x 51/2"	5/op.
273438	Otwarty koniec	Tak	1,2x180 mm / 3,5 Fr x 7"	5/op.

Cewnik dla kotów BUSTER Barium

- Wykonany z miękkiego i biokompatybilnego poliuretanu, a zatem idealny dla hospitalizowanych pacjentów
- Nadaje się do długotrwałego stosowania w miejscu (do 7 dni)
- Wykrywalny w RTG, co sprawia, że cewnik jest idealny do lokalizowania niedrożności



Nr kat.	Typ	Wyrób jałowy	Wymiary	Opakowanie
273467	Otwory boczne, z mandrynem	Tak	1,0x130 mm / 3 Fr x 51/8"	12/op.
273468	Otwory boczne, z mandrynem	Tak	1,3x130 mm / 4 Fr x 51/8"	12/op.





Cewnik do inseminacji psów BUSTER

Cewnik ma atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy. Miękką niebieską końcówkę złącza PVC zapewnia łatwe, elastyczne i szczelne połączenie ze złączem Luer slip strzykawki.

Nr kat.	Wyrób jałowy	Długość	Opakowanie
273402	Tak	30 cm / 11,8"	12/op.



Żel BUSTER Clinic

Żel poślizgowy do cewnikowania, badania odbytnicy i badania pochwy.

Nr kat.	Wymiary	Opakowanie
180518	150 ml	4/op.



Żel poślizgowy do cewników KRUUSE

Doskonale zwilżanie dla cewników i instrumentów AI. Nie zawiera środków przeciwbólowych ani konserwantów.

Nr kat.	Wyrób jałowy	Wymiary	Opakowanie
340626	Nie	250 ml	1/op.






Worki na mocz BUSTER

Podłączyć worek na mocz do cewnika BUSTER lub cewnika moczowego BUSTER NC, aby zbierać i kontrolować przepływ moczu podczas cewnikowania. Worek jest wyposażony w zawór zwrotny, który zapobiega wstęcznemu przepływowi moczu. Ponadto worek jest wyposażony w orientacyjną skalę objętości i zawór zwalniający „push-pull”, który umożliwia opróżnienie worka. Dostępny z połączeniem Luer Lock i Foley.



Złącze do cewnika Foley

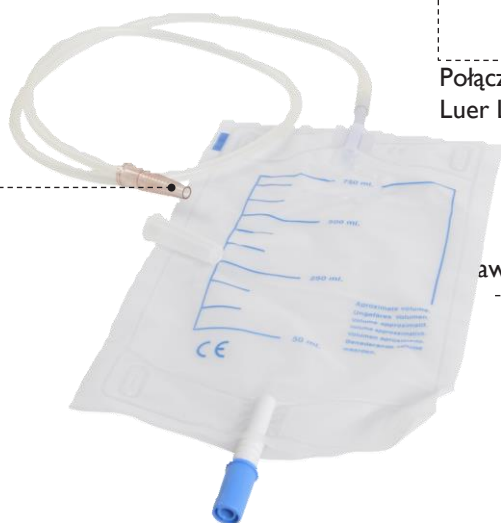

Nr kat.	Typ	Opakowanie
273855	Połączenie Luer Lock	10/op.
273856	Złącze do cewnika Foley	10/op.



Wieszak BUSTER do worków na mocz

Do łatwej pracy z workami na mocz BUSTER (nr kat. 273855 i 273856). Łatwy do powieszenia na stołach chirurgicznych lub kłatkach.

Nr kat.	Opakowanie
273857	10/op



Żwirek Catrine

Jest to wygodny i niedrogi zestaw do pobierania próbek moczu od kotów, opracowany specjalnie dla lekarza weterynarii i właściciela kota.



KRUUSE Kit4Cat

KRUUSE Kit4Cat to rewolucyjny biodegradowalny piasek hydrofobowy, który ma naturalną nietoksyczną powłokę odpychającą mocz. Umożliwia lekarzom weterynarii, technikom i właścicielom kotów szybkie i łatwe pobranie próbki moczu kota, bez konieczności użycia procedur inwazyjnych, takich jak cystocenteza. Mocz kota pozostanie na górze, co pozwoli na pobranie go za pomocą pipety i fiolki.

Nr kat.	Wymiary	Opakowanie
275021	200 g / 7 oz	1/op.

Nr kat.	Wymiary	Opakowanie
275011	3x300 g / 3x10,6 oz	1/op.

Zamawiaj na www.medivet.pl

Dystrybutor MEDiVET S.A. ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem
Tel. +48 61 62 255 00, fax +48 61 622 55 56;
e-mail: biuro@medivet.pl

Zamawiaj na www.medivet.pl

